



EasyFlow nCPAP

Das nicht-invasive Beatmungssystem-Zubehör für die Neonatologie

Neu:

- + Stirnauflagekissen mit selbsthaftendem Silikongel und flexiblen Kopfbändern

- + Perfekte Passform durch anatomisches Design
- + Einfache Handhabung und schonende Anwendung
- + Extrem weicher und flexibler Prong
- + Selbstabdichtende Maske
- + Stirnauflagekissen mit Silikongel zur direkten Fixierung auf der Haut
- + Flexible Kopfbänder als Alternative zu traditionellen Mützchen



EasyFlow nCPAP

Das neue EasyFlow-Systemzubehör der Fritz Stephan GmbH passt sich optimal der Anatomie von Frühchen und Neugeborenen an. Für die schonende, nicht-invasive Beatmung sind perfekt sitzende Prongs oder Masken von entscheidender Bedeutung. Das EasyFlow-Systemzubehör ist einfach zu bedienen und bildet mit den Neonatal-Beatmungssystemen SOPHIE oder

STEPHANIE eine perfekte Einheit. Selbstverständlich ist dieses sichere und gutsitzende System auch kompatibel mit den meisten auf dem Markt befindlichen Neonatal-Beatmungsgeräten.

Das neue Stirnauflegekissen mit Silikongel haftet aufgrund ihrer adhäsiven Eigenschaften direkt auf der Haut. Es benötigt keine zusätzliche Fixierung durch ein Mützchen oder ähnliches. Das biokompatible Silikongel enthält keine löslichen Weichmacher.


Das in drei Größen erhältliche Kopfband erlaubt jederzeit eine einfache Kontrolle der Passform zum sich stetig ändernden Kopfumfang des Patienten. Das Kopfband unterstützt dabei nur die Ausrichtung der binasalen Prongs oder Masken mittels weicher Fixierbändchen. Sie sind aus hautverträglichem Material und mit Klettverschlüssen ausgestattet, um an Prong oder Maske befestigt und am Kopfband fixiert zu werden.

Für maximalen Tragekomfort findet hochwertiges, extrem weiches und flexibles Silikon Verwendung.

Der Nasen-Prong vermeidet Haut- und Schleimhautirritationen und liegt durch die perfekte Passform des anatomischen Designs nicht auf der Nasenscheidewand auf und übt so keine Belastung auf das Septum aus.

Die Maske bietet ebenfalls durch ihr spezielles Faltenbalg-Design optimalen Sitz und ist selbstabdichtend.

Das Stirnauflegekissen mit selbsthaftendem Silikongel nimmt den Applikator auf, an den die Schläuche, Nasenprongs oder Masken angedockt werden. Durch einen integrierten Magneten wird der Applikator millimetergenau auf der Stirnauflage justiert. So entsteht eine optimale Druck- und Zugentlastung.

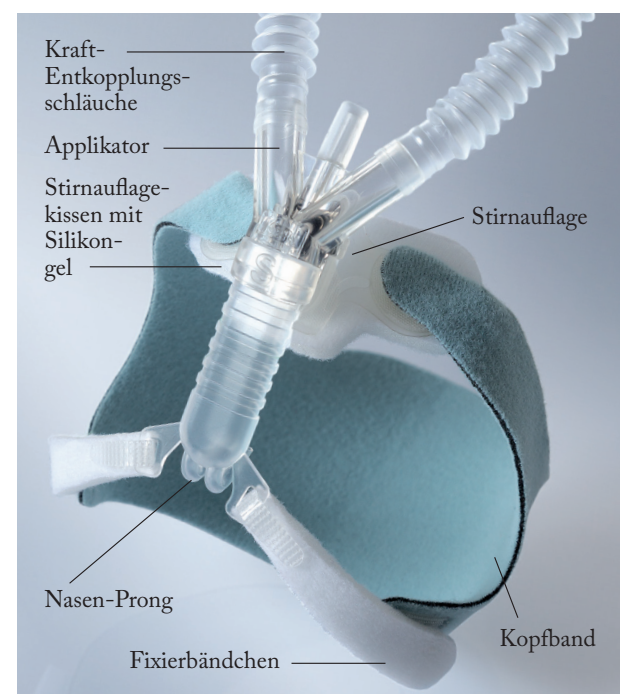

Das einfach zu bedienende Systemzubehör besteht aus dem neuen Kopfband, einem Stirnauflegekissen mit oder ohne Silikongel, der Stirnauflage, einem Applikator mit Magnet sowie Prong oder Maske. Durch den Magneten sind Prong und Maske stufenlos längen- und höhenverstellbar. Optional können Kraft-Entkopplungsschläuche sowie ein Medikamentenvernebler angeschlossen werden.

Alle Komponenten sind leicht anzuwenden und passen sich optimal und individuell der Anatomie des kleinen Patienten an. Nasen-Prongs und Masken sind in verschiedenen Größen beziehbar. Die neuen Kopfbänder lassen sich leicht auf sich ändernde Kopfumfänge einstellen.

EasyFlow nCPAP – die perfekte Passform, schonend und sicher.

Schnelle und sichere nCPAP-Systeme sind mitverantwortlich für eine erfolgreiche nicht-invasive Beatmungstherapie. Das neue Stirnauflegekissen mit Silikongel kann sofort nach der Geburt auf der Haut des Neugeborenen angebracht werden. Evtl. muss die Auflagestelle ein wenig von der Käseschmiere gereinigt werden, weitere Vorbereitungen sind nicht notwendig. Die binasalen Prongs des EasyFlow-Systems erlauben dann eine sofortige und sichere Durchführung der nCPAP-Therapie bis der Patient auf der Intensivstation komfortabler versorgt werden kann.

Sobald der Patient in die Routineversorgung aufgenommen werden kann, sorgen die flexiblen Kopfbänder mittels der weichen Fixierbändchen für eine stabile, störungsfreie Beatmungstherapie. Diese Art der Fixierung mit Kopfband und unabhängig positionierter Stirnauflage befreit den Kopf des Neugeborenen von Einschnürungen durch traditionelle Mützchen, falls diese in der Größe falsch gewählt wurden.

Selbstverständlich kommen unsere bewährten Mützchen mit der Farbkodierung für 11 lieferbare Größen weiterhin zum Einsatz. Das hautsympathische Material hat sich im klinischen Alltag bewährt und bietet viele Vorteile.












EasyFlow nCPAP-Mützchen mit perfekter Passform, schonend und sicher.





Clinical Experience
Technical Competence

EasyFlow nCPAP: das Systemzubehör im Überblick

| Mützen (werden mit einer Stirnauflage sowie den Fixierbändchen geliefert) | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|-------|--------------|
| Größe | Farbe | Kopfumfang | Gewicht | Menge | Artikel-Nr. |
| XS |  | 20 - 22 cm | 500 - 700 g | 1 | 1 701 61 019 |
| S |  | 22 - 24 cm | 700 - 900 g | 1 | 1 701 61 020 |
| M |  | 24 - 26 cm | 900 - 1.200 g | 1 | 1 701 61 021 |
| L |  | 26 - 28 cm | 1.200 - 1.600 g | 1 | 1 701 61 022 |
| XL |  | 28 - 30 cm | 1.600 - 2.400 g | 1 | 1 701 61 023 |
| XXL |  | 30 - 33 cm | 2.400 - 3.000 g | 1 | 1 701 61 024 |
| 3XL |  | 33 - 36 cm | 3.000 - 4.200 g | 1 | 1 701 61 025 |
| 4XL |  | 36 - 39 cm | 4.200 - 6.000 g | 1 | 1 701 61 026 |
| 5XL |  | 39 - 42 cm | 6.000 - 7.300 g | 1 | 1 701 61 027 |
| 6XL |  | 42 - 45 cm | 7.300 - 8.800 g | 1 | 1 701 61 028 |
| 7XL |  | 45 - 48 cm | > 8.800 g | 1 | 1 701 61 029 |

Kopfband micro komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 040

| bestehend aus: | Kopfumfang | Gewicht | |
|------------------------|------------|---------------|--|
| Kopfband micro | 20 - 28 cm | 500 - 1.350 g | |
| 2 Stück Fixierbändchen | | | |
| Stirnaufklage | | | |

Kopfband mini komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 041

| bestehend aus: | Kopfumfang | Gewicht | |
|------------------------|------------|-----------------|--|
| Kopfband mini | 28 - 36 cm | 1.350 - 3.700 g | |
| 2 Stück Fixierbändchen | | | |
| Stirnaufklage | | | |

Kopfband maxi komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 042

| bestehend aus: | Kopfumfang | Gewicht | |
|------------------------------|------------|-----------------|--|
| Kopfband maxi | 36 - 48 cm | 3.700 - 8.400 g | |
| 2 Stück Fixierbändchen, lang | | | |
| Stirnaufklage | | | |

| | Menge | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| Stirnaufklagekissen mit Silikonring | 5 | 1 701 61 018 |
| Stirnaufklagekissen ohne Silikonring | 5 | 1 701 61 017 |

| | Menge | Artikel-Nr. |
|---|-------|--------------|
| Applikator mit Magnet und Druckanschlusskappe | 5 | 1 701 61 161 |
| Kraft-Entkopplungsschlauch Set Ø 10 mm | 5 | 1 701 63 408 |
| Kraft-Entkopplungsschlauch Set Ø 12 mm (F&P) | 5 | 1 701 63 409 |
| Verlängerung Maske/Prong | 5 | 1 701 61 000 |

Prongs

| Größe | Menge | Artikel-Nr. |
|-------|-------|--------------|
| XS | 5 | 1 701 61 006 |
| S | 5 | 1 701 61 001 |
| M | 5 | 1 701 61 002 |
| L | 5 | 1 701 61 003 |
| XL | 5 | 1 701 61 004 |

Masken

| Größe | Menge | Artikel-Nr. |
|-------|-------|--------------|
| XS | 5 | 1 701 61 005 |
| S | 5 | 1 701 61 012 |
| M | 5 | 1 701 61 013 |
| L | 5 | 1 701 61 014 |
| XL | 5 | 1 701 61 015 |